

# Igiene e trasporto



## Sollevatori Sunlift



### Sunlift 130 Mini E

Sollevatore di facile impiego, particolarmente indicato per coloro che richiedono un attrezzo leggero e facile da trasportare, o che dispongono di spazi ridotti. Apertura gambe con pedaliera manuale. Completo di caricabatteria, batteria estraibile, imbracatura SL1003. Portata massima 130 kg. Massima elevazione alla staffa 1480 mm. Minima elevazione alla staffa 470 mm

art. 03.01.0001

### Sunlift 150 Midi E

È questo il modello più versatile, abbina la buona capacità di sollevamento alle dimensioni ottimali per le strutture protette. Apertura gambe con pedaliera manuale. Completo di caricabatteria, batteria estraibile. Imbracatura esclusa. Portata massima 150 kg. Massima elevazione alla staffa 1625 mm. Minima elevazione alla staffa 500 mm

art. 03.01.0002

### Sunlift 175 Major E

Facile da utilizzare, è impiegabile nella maggior parte delle situazioni. Particolarmente indicato per strutture ospedaliere ove è necessario disporre di una buona portata e un'ampia elevazione. Apertura gambe con pedaliera manuale. Completo di caricabatteria, batteria. Imbracatura esclusa. Portata massima 175 kg. Massima elevazione alla staffa 1720 mm. Minima elevazione alla staffa 520 mm

art. 03.01.0003

## Sollevatore elettrico Arise



Nuovo e rivoluzionario sollevatore che unisce i vantaggi del tradizionale sollevatore a quelli dello stabilizzatore. Utilissimo per effettuare il cambio del pannolone. Completo di caricabatteria, batterie. Imbracatura esclusa. Portata massima 170 kg; Massima elevazione alla staffa 1700 mm; Minima elevazione alla staffa 1160 mm; Totale altezza delle gambe da terra 120 mm; Ampiezza esterna (gambe chiuse) 610 mm Batterie 2x12 V. Alimentazione caricabatteria 220 V.

art. 03.01.0005

## Sollevatore elettrico Gemini

Struttura realizzata in tubo di acciaio a sezioni differenziate ad alta resistenza meccanica verniciato con polveri epossidiche. Maniglione direzionale di spinta, con angoli arrotondati anti-trauma. Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 4 ruote di cui 2 con freno indipendente. Movimentazione salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC e pulsantiera con cavo. Batteria ricaricabile a mezzo di trasformatore a rete. Il sollevatore è inoltre dotato di pulsante di emergenza che consente il blocco immediato delle movimentazioni e di pistone libero di salita e discesa in rispetto alle norme di sicurezza in vigore. Minima elevazione alla staffa 830 mm; Massima elevazione alla staffa 1.790 mm; Portata 160 kg.

art. 03.01.0010



## Sollevatore elettrico Presence



Sollevatore speciale per pazienti particolarmente pesanti. Altezza e apertura gambe regolabile elettricamente mediante pulsantiera. Portata massima 227 Kg. Completo di caricabatteria, batterie. Imbracatura speciale esclusa. Portata massima 227 kg; Massima elevazione alla staffa 1910 mm; Minima elevazione alla staffa 440 mm; Totale altezza delle gambe da terra 120 mm; Ampiezza esterna (gambe chiuse) 700 mm; Batterie 2x12 V. Alimentazione caricabatteria 220 V.

art. 03.01.0076

## Sollevatori da soffitto Voyager



Sollevatori da soffitto adattabili ad ogni struttura utilizzando l'ampia gamma di accessori a disposizione per creare binari sicuri su cui far scorrere l'apparecchiatura

### Modelli:

**art. 03.01.0012**

Voyager portata 190 kg bidirezionale

**art. 03.01.0013**

Voyager portata 190 kg monodirezionale

**art. 03.01.0014**

Voyager portata 250 kg bidirezionale

**art. 03.01.0015**

Voyager portata 250 kg monodirezionale

Per preventivi è indispensabile un sopralluogo del nostro personale. Contattateci per informazioni



## Imbracature sollevatori



**art. 03.01.0050**

Imbracatura standard per Standard SL13500



**art. 03.01.0051**

Imbracatura da trasporto per Standard SL13501



**art. 03.01.0052**

Imbracatura integrale a fasce Media SL1012 (ex 1003)

**art. 03.01.0053**

Imbracatura integrale a fasce Larga SL1015 (ex 1006)



**art. 03.01.0054**

Imbracatura integrale a fasce imbottita Media SL1012P (ex 1003P)

**art. 03.01.0055**

Imbracatura integrale a fasce imbottita Larga SL1015P



**art. 03.01.0056**

Supporto testa SL1700



**art. 03.01.0074**


Imbracatura con supporto capo integr. Piccola SL1060P

**art. 03.01.0057**

Imbracatura con supporto capo integr. Media SL1063P

**art. 03.01.0062**

Imbracatura con supporto capo integr. Larga SL1066P

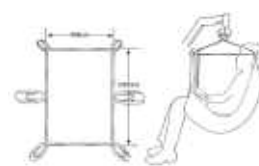


**art. 03.01.0060**

Imbracatura per amputati Media SL1103

**art. 03.01.0061**

Imbracatura per amputati Larga SL1106

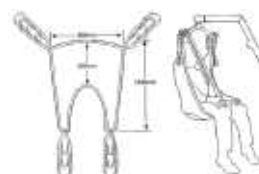


**art. 03.01.0072**

Imbracatura per toelette a rete SL1004




**art. 03.01.0075**

Imbracatura per toelette a rete con foro SL1129

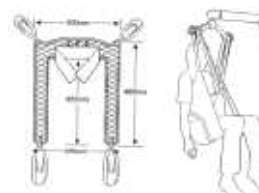

**art. 03.01.0081**

Imbracatura per spostamenti in bagno SL1603

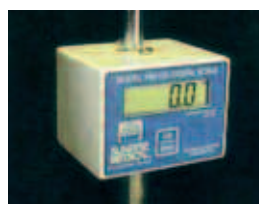

**art. 03.01.0058**

Bilancia digitale sollevatori sunlift



## Sistemi di trasferimento

I sistemi di trasferimento MTS sono studiati per salvaguardare la schiena degli operatori sanitari e per tutelare la sicurezza dei pazienti durante la movimentazione ed il trasferimento. Gli speciali materiali di costruzione facilitano lo spostamento e scivolamento dei pazienti



**art. 03.01.0031**

Minitrans cm 60x60

**art. 03.01.0032**

Meditrans cm 60x120

**art. 03.01.0033**

Maxitrans cm 60x190



**art. 03.01.0034**

Turn cm 90x190



**art. 03.01.0035**

Lift cm 36x117



**art. 03.01.0036**

Support cm 9x50/110

**art. 03.01.0037**

Support cm 9x70/130



**art. 03.01.0038**

Kit trasferimento MTS